



Dream Sock için Hızlı Başvuru Kılavuzu

İlk Kurulum için Uygulamayı kullanın

Owlet Baby Care Müşteri Hizmetleri
Ücretsiz Telefon: +1 (844) 334-5330
E-posta: contact@owletcare.com
<https://support.owletcare.com/hc/en-us>
Türkiye Müşteri Destek Hattı: 0216 504 15 44

Yayın tarihi: 28-10-2024

QRG-19.0316 Rev 6



UYARI! Cihazı ve aksesuarlarını daima çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Sensör ve kablolar gibi küçük parçalar boğulma tehlikesi oluşturabilir. Kabloya dolanarak boğulma tehlikesini önlemek amacıyla Baz İstasyonunu bebek yatağından en az bir metre uzağa yerleştirin.



UYARI! Mobil cihaz uygulamasının birincil bildirim kaynağı olarak kullanılması amaçlanmamıştır. Birincil bildirim kaynağı Baz İstasyonudur. Baz İstasyonunu her zaman duyabileceğiniz bir mesafede tutun. Baz İstasyonunun ortam gürültüleriyle (ör. gürültülü makineler veya televizyonlar) engellenmeden duyulabildiğinden emin olun. Baz İstasyonunun üzerinin örtülmediğinden emin olun, aksi takdirde alarm sesleri bastırılabilir.



ÜRÜNLERİMİZİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE KULLANMAK VE ÇOCUĞUNUZUN BAKIMI İÇİN: BİLDİRİM VERİLDİĞİNDE DERHÂL YANIT VERİN.



UYARI! OWLET DREAM SOCK, YETİŞKİN GÖZETİMİNİN, İYİ EBEVEYNLİK UYGULAMALARININ VEYA GÜVENLİ UYKU UYGULAMALARININ YERİNE GEÇMEZ.



Dream Sock, sağlık sorunları olan çocuklarda/bebeklerde kullanım için uygun değildir. Sağlık sorunları olan bebeklerde, Owlet Dream Sock'ın çocuğunuz için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla lütfen sağlık uzmanınıza danışın.



Sağlık Bildirimleri sunan Owlet Dream Sock, 2,5-13,6 kg ağırlığındaki 0-18 aylık bebeklerde kullanılmak için tasarlanmıştır.

Kullanmaya başlama

Uygulamayı indirin



Yeni Dream Sock'ınızın kurulumunu tamamlamak için Owlet Dream App'i kullanın.

İndirdikten sonra Uygulamadaki kurulum adımlarını uygulayın. Uygulama şu adımlarda yönlendirme sağlar:

- ✓ Hesap Oluşturma
- ✓ Hesap Onayı
- ✓ Cihaz Kurulumu
- ✓ Wi-Fi ağına bağlanma
- ✓ Baz İstasyonunu Kaydetme
- ✓ Sock'ı Eşleştirme
- ✓ Çocuk Profili Oluşturma
- ✓ Zorunlu Eğitim

Owlet Dream Sock size ve bebeğinize uygun mu?

0-18 ay

2,5 - 13,6 kg

- 0-18 aylık, **2,5-13,6 kg** ağırlığında olan bebeklerde kullanılmak içindir.
- Bakım verenin denetiminin yerini tutmaz.

Cihaza genel bakış

Sock, Sensörün bebeğin ayağında kalmasını sağlar. Sensör bebeğinizin ölçümlerini toplar ve Baz İstasyonuna gönderir. Baz İstasyonu da ölçümleri akıllı cihazınıza iletir.



Çorap beden 1 ve 2
her iki bedende sağ
ve sol Sock



Sock Sensörü



Baz İstasyonu



**USB Güç
Kablosu ve Fişi**



Güç Adaptörü



Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Dream App

Çorap bedeni, uyumu ve yerleşimi


Doğru çorap bedeni, uyum ve yerleşim, Dream Sock performansı açısından çok önemlidir.

1. Çorabı'ı Baz İstasyonundan çıkarın

Çorabı şarj bağlantı noktasından çıkardığınızda Baz İstasyonu yeşil renkte yanıp sönmeye başlar; bu, çorabın çocuğunuzdan ölçüm almaya çalıştığını gösterir. Bu noktada çorabı çocuğunuzun ayağına giydirmeniz gerekir.

2. İki Çorap bedeninden birini seçin

Her kutuda 4 çorap bulunur. Sol ve sağ ayak için 2'şer beden sağlar. Ağırlığa göre başlangıç bedenini seçmek için aşağıdaki kılavuzu kullanın. Ardından gereken uyumu sağlamak için farklı bedeni deneyin.

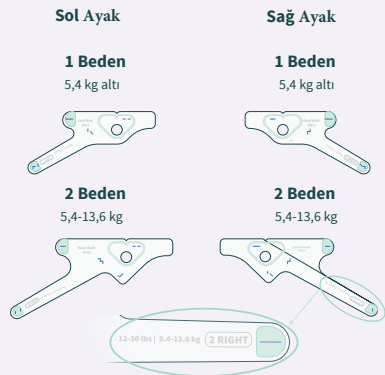


DİKKAT.

Çorabın bebeğinize uyumunu düzenli olarak kontrol edin. Bebeğinizin gerçek ayak ölçüsü yukarıdaki kılavuzda gösterilenden farklı olabilir ve bebekler hızlı büyürler. Bebeğinizin ağırlığı **13,6 kg'a** ulaştığında veya en büyük Sock bedeni bebeğinize küçük gelmeye başladığında cihazı kullanmayı bırakın.

3. Sensörü takın (henüz takılmamışsa)

Sensörü çoraba takmak için Sensörün üzerindeki çentiği çorabın üzerindeki çentikle hizalayın. çoraptaki deliği esneterek Sensörün üzerine getirin.

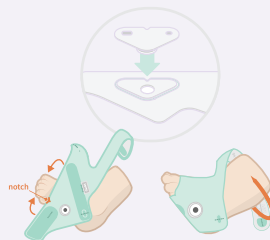

4. Çorabı yerleştirin

Çorabı, ayağın dış tarafındaki çentik serçe parmağın arkasına gelecek şekilde ilgili ayağa (sol/sağ) yerleştirin. Sock ayak parmaklarına DEĞMEMELİDİR. “TOP” kelimesi ayağın üst kısmında ayak parmaklarının yakınında olmalı, bilek kısmında olmamalıdır.



DİKKAT.

Bağlarken bantları ESNETMEYİN. Bantların esnetilmesi aşırı sıkıma neden olur, kızarıklık izlerinin oluşması ve cildin tahriş olması riskini artırır.

5. Çorap Uyumunu ve Yerleşimini doğrulayın




UYARI.

Sock'ın ayağa uymaması veya bakımının yapılmaması ciltte yaralanmaya yol açabilir.

Sock'ı ayakla eşleştirin

Sol ayak için sol Sock'ı, sağ ayak için sağ Sock'ı kullandığınızdan emin olun. Her Sock “**Sağ**” veya “**Sol**” şeklinde işaretlenmiştir.

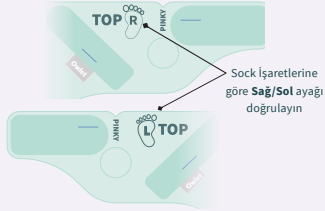

Hassas bölgeleri koruyun

- Bantların aşındırıcı kısmının cilde temas etmemesine dikkat edin.
- Çorap ayak parmaklarını geçmeyecek şekilde takılmalıdır.



Çorap bedenini kontrol edin

Çorap çok küçük

Bantlardan biri bağlayıcı kısmına doğal olarak ulaşamıyorsa daha büyük bir Sock bedeni kullanmayı deneyin. Bantları esneterek Sock'ı çok sıkı olacak şekilde sarmayın, aksi takdirde çocuğunuz rahatsız olabilir.



Çorap çok büyük

Bantlardan biri bağlayıcıyı geçiyorsa daha küçük bir Sock bedeni kullanmayı deneyin. Sock ve bantlar ayağa tam oturmalıdır.



Bantları kontrol edin

Bantların doğru ayarlandığından emin olun. Aşırı SIKMAYIN. Bantlar cilde düz bir şekilde temas etmeli ancak cilde baskı yapmamalıdır. Bağlarken bantları esnetmeyin. Bantların aşırı esnetilmesi aşırı sıkılaşmaya yol açar.

6. Baz İstasyonunu kontrol edin

Çorap çocuğunuzun ayağına giydirildikten sonra Baz İstasyonunu kontrol edin. Hafif bir yeşil ışığın yavaş yavaş sönüğünü gördüğünüzde çocuğunuzun ölçümleri yapılıyor ve değerler normal demektir.

Kızarıklık izlerinden ve cilt tahrişinden kaçınma

Çorabın yanlış kullanımı rahatsızlığa neden olarak bebeğinizin ayağında kızarıklık izlerine, bası yaralarına veya kabarcıklara yol açabilir.

Cilt tahrişini önleme

- Bebeğiniz için doğru çorap bedenini seçin.
- Sock'ın altında losyon veya pudra kullanmaktan kaçının. Cildi temiz ve kuru tutun.
- Sock'ın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve ayarlandığından emin olun.
- Çorabın kullanıldığı ilk hafta boyunca ve Sock bedenini değiştirdikten sonra cildi 4 saatte bir kontrol edin. çorap ile temasa bağlı oluşan ve 8 saat içinde kaybolan izlerin görülmesi normaldir.
- En az 8 saatte bir çorabı diğer ayağa geçirin.
- Çorabı 2 haftada bir veya kirlendiğinde elde yıkayın. Kullanmadan önce iyice kurutun.
- Her kullanımdan sonra çocuğunuzun ayaklarında tahriş olup olmadığını kontrol edin. Cilt tahrişi olan ayağa UYGULAMAYIN.

Cilt tahriş olursa ne yapılmalı?

- Etkilenen ayakta Sock'ı kullanmayı bırakın ve tahriş tamamen geçene kadar çorabı yalnızca etkilenmeyen ayağa uygulayın.
- Tahriş 8 saat içinde geçmezse sağlık uzmanınızla iletişime geçerek yedek bir pulse oksimetreye gerek olup olmadığını belirleyin.
- Kızarıklık izlerinin oluşmasını önlemek için bire bir yardım almak üzere Owlet Müşteri Desteği birimiyle iletişime geçin.
- Etkilenmeyen ayakta Sock'ın altında kalan cildi 4 saatte bir kontrol ederek tahrişin tekrar oluşmadığından emin olun.
- Her iki ayakta da tahriş görülürse kullanmayı bırakın ve sağlık uzmanınıza danışın. Çorabın tahriş olmuş cilde tekrar uygulanması ciltteki hasarın artmasına neden olabilir.



Çorabın Temizlenmesi



Kumaş Çoraba, Sensöre ve Baz İstasyonuna iyi bakmanız Dream Sock'ınızın daha uzun ömürlü ve bebeğiniz için daha konforlu olmasını sağlar. Sock'ın ve Sensörün en az iki haftada bir, Baz İstasyonunun ise en az 30 günde bir temizlenmesini öneririz. Kirlenir veya lekelenirse bu parçaları daha sık temizlemeniz gerekebilir.


Ayrıntılı temizlik talimatları için lütfen Kullanım Kılavuzundaki Bölüm 8: Temizlik kısmına bakın.

Baz İstasyonuna Yer Bulma

Uygulamayı kurduktan sonra Baz İstasyonunu evinizde ideal bir yere yerleştirmek isteyebilirsiniz. Baz İstasyonunun evde bulunduğu konum, düzgün performans ve güvenlik açısından önemlidir. Aşağıdaki kılavuzu kullanarak Baz İstasyonunuz için en iyi yeri belirleyin.

Baz İstasyonunu Yerleştirme

- Evinizin durumuna bağlı olarak en iyi yer çocuğunuzun odası OLMAYABİLİR. Uyarıları her zaman duyabilmeniz için gün içinde Baz İstasyonunun yerini değiştirmeniz gerekebilir.
- Baz İstasyonu, sesli ve görsel tüm bildirimlerin birincil kaynağıdır. Bakım Verenin arka plan güdültüleri ve dikkat dağıtıcı unsurlar arasında bildirimleri görebileceği ve duyabileceği bir yere yerleştirilmelidir. Gerekirse gün içinde yerini değiştirin.
- Baz İstasyonu, bildirim verildiğinde Bakım Verenleri uyandırabilecek şekilde yerleştirilmelidir. Baz İstasyonunun ışıkları karanlık odalarda otomatik olarak kısılır.
- Baz İstasyonu, evinizdeki Wi-Fi ağının kapsama alanında olmalıdır.
- Çoğu durumda, Sensör ve Baz İstasyonunun iletişim kurulabilmesi için aynı evde (birbirlerinden 30 metre uzaklıkta) olmaları yeterlidir. Ancak evin büyüklüğü ve yerleşim planı sinyal gücünü etkileyebilir, buna bağlı olarak Baz İstasyonunun Sensöre daha yakın bir yere yerleştirilmesi gerekebilir.

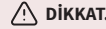

DİKKAT.

Kabloya dolanarak boğulma tehlikesini önlemek için Baz İstasyonunu ve kabloyu bebek yatağından uzakta ve çocuğunuzun erişemeyeceği bir yerde tutun.

Baz İstasyonunu çocuğunuzun üzerine düşebileceği herhangi bir pozisyonda **YERLEŞTİRMEYİN.** Yaralanma meydana gelebilir.

Bluetooth Kapsama Alanı Göstergesi (Uygulama İçi)

- Sensörün Baz İstasyonuyla kurduğu Bluetooth bağlantısının kalitesini belirtir.
- Sensör bağlantısını iyileştirmek için Baz İstasyonunu bebeğe yaklaştırın.**

Önerilen



İyi



İyi



Kötü




Bağlantı Kesildi

 **Sock ışığı**
Yeşil ışık, Sensörün Bluetooth üzerinden
Baz İstasyonuna bağlandığını belirtir

 **Wi-Fi ışığı**
Yeşil ışık, Baz İstasyonunun Wi-Fi
ağına bağlı olduğunu belirtir

Durum ışığı
Işık halkası çocuğunuzun
durumunu gösterir

Düğme
Baz İstasyonunun üst kısmına uzun basma
Baz İstasyonunu açar/kapatır
Bir kez kısa basma
Sesli bildirimi duraklatır

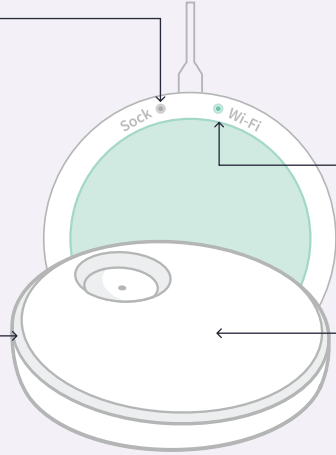

Çorap kullanılmıyorken izlemeyi kapatın ve Sensörü şarj edin



Cihazı kullanmayı bırakmak ve Sensörü şarj etmek için Sensörü Baz İstasyonuna yerleştirin. Bu işlem, Sensör Baz İstasyonundan çıkarılana kadar tüm bildirimleri de devre dışı bırakır.

Sensör şarj olurken Baz İstasyonunun ışığı beyaz renkte yanıp söner ve Sensör tam şarj olduğunda sürekli beyaz yanmaya başlar. Sensör 90 dakikada tam şarj olur ve 20 dakikalık şarjla 8 saatlik kullanım sağlar.

Alternatif olarak, bir uyarı sesi duyulana ve ışık sönene (izleme kapatılana) kadar Baz İstasyonunu basılı tutun. Sensör bebeğe takılı olsa bile sesli bildirim verilmez. Hızla dokunduğunuzda Baz İstasyonu tekrar açılır ve izleme devam ettirilir.



Diğer bir seçenek olarak, Uygulamadaki Baz İstasyonu açma/kapatma düğmesini kullanabilirsiniz.



Baz İstasyonu: Açık



Kurtarma Modu

Baz İstasyonu kapatıldığında, 4 dakika boyunca sürekli ölçüm algılanırsa 20 dakika sonra otomatik olarak bir izleme oturumu başlatılır.

Kurtarma Modu, Uygulamanın ana ekranındaki Sock denetim merkezi kullanılarak devre dışı bırakılabilir. Bir sonraki Sock oturumu başladığında Kurtarma Modu otomatik olarak etkinleştirilir.

Kurtarma Modu etkinleştirilemezse anlık bildirim gönderilir.

Baz İstasyonu Göstergesi	Durum	Anlamı (Bildirim Koşulu)	Ne yapmalısınız?
 Hızlı Yanıp Sönen Kırmızı Işık Yüksek Öncelikli	Düşük Kalp Atış Hızı	Kalp Atış Hızı 50 BPM'nin altında	Bebeğinizi hemen kontrol edin ve iyi olup olmadığına bakın. Bebeğinizin solunumu, cilt rengi (morarmış veya soluk mu), hareketliliği ve uyanıklığı kontrol edilmelidir. Bebeğinizin iyi olmadığına dair endişeleriniz varsa lütfen tıbbi yardım alın.
	Yüksek Kalp Atış Hızı	Kalp Atış Hızı 220 BPM'nin üzerinde	
	Düşük Oksijen	Oksijen %80'in altında	
 Hızlı Yanıp Sönen Sarı Işık Orta Öncelikli	Ölçüm Alınamıyor	Sensör yanlış yerleştirilmiş ve hareket olmadığı hâlde son 90 saniye içinde geçerli veriler sağlayamamış olabilir VEYA son 240 saniye içinde veri alınamamıştır ve aşırı hareket vardır.	Sensörün yerleşimini kontrol edin ve bebeğin kıpırdamadığından veya aşırı bir şekilde hareket ettirilmediğinden (ör. sallama ya da kucakta tutma) emin olun. Sensör yeniden yerleştirildikten VE bebek hareket etmeyi bıraktıktan sonra bu bildirimin silinmesi 10-20 saniye sürebilir. Hareket durana kadar izlemeyi kapatın.
	Güç Kesintisi	Baz İstasyonu şebeke elektriği almamaktadır ve yedek pille çalışmaktadır.	Bağlantıları kontrol ederek cihaza tekrar elektrik sağlayın veya kullanmayı bırakın.
	Bağlantı Sorunu	Baz İstasyonunun kapsama alanının dışında olması, gücün kesilmesi veya dâhilî bir sorun nedeniyle Sensörün Baz İstasyonuyla bağlantısı 60 saniye boyunca kesilmiştir.	Baz İstasyonunu sensöre yaklaştırın veya ikisinin arasında sinyali engelleyen hiçbir şey olmadığından emin olun. Uygulamada Sensör pil seviyesini kontrol edin.
 Sürekli Yanan Mavi Işık Düşük Öncelikli	Sensör Pili Zayıf	Sensörün 50 dakika veya daha az pil ömrü kalmıştır.	Sensörü en kısa süre içinde şarj cihazına yerleştirin.
 Hızlı Yanıp Sönen Eflatun Bildirim	Uyku Desteği	Bebeğiniz aşırı hareket ediyordur veya uzun süredir hareket hâlinde dir.	Bebeğinizi kontrol edin. Tekrar uykuya dalmak için yardımınıza ihtiyacı olabilir.

Baz İstasyonu Göstergesi**Anlamı (Durum Koşulu)****Yanıp Sönen Yeşil Işık**

Sensör Baz İstasyonuna bağlanmıştır ve ölçüm almaktadır

**Hızlı Yanıp Sönen Yeşil Işık**

Sensör ilk ölçümleri almaktadır veya bebek hareket etmektedir. Çok fazla hareket olduğunda ölçümler Uygulamada gösterilmez.

**Sürekli Yanan Beyaz Işık**

Baz İstasyonunda şarj edilen Sensör tam şarj olmuştur

**Yanıp Sönen Beyaz Işık**

Baz İstasyonundaki Sensör şarj olmaktadır

**Yanıp Sönen Beyaz Işık**

Baz İstasyonunda şarj olan Sensör, Baz İstasyonu ile eşleştirilmemiştir




Baz İstasyonunda şarj olan Sensör, farklı bir Baz İstasyonu ile eşleştirilmiştir

Sağlık Bildirimleri

Bir uyku oturumu boyunca canlı Kalp Atış Hızı ve Oksijen Doygunluğu seviyelerini takip edin ve Kalp Atış Hızı veya Oksijen Doygunluğu önceden belirlenmiş aralıkların dışına çıktığında bildirim alın


Kalp Atış Hızı aralıkları

Bebeğinizin Kalp Atış Hızı aşağıdaki seviyelerde olduğunda bildirim tetiklenir:

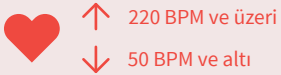

Oksijen Doygunluk aralıkları

Bebeğinizin Oksijen Doygunluğu aşağıdaki seviyelerde olduğunda bildirim tetiklenir:

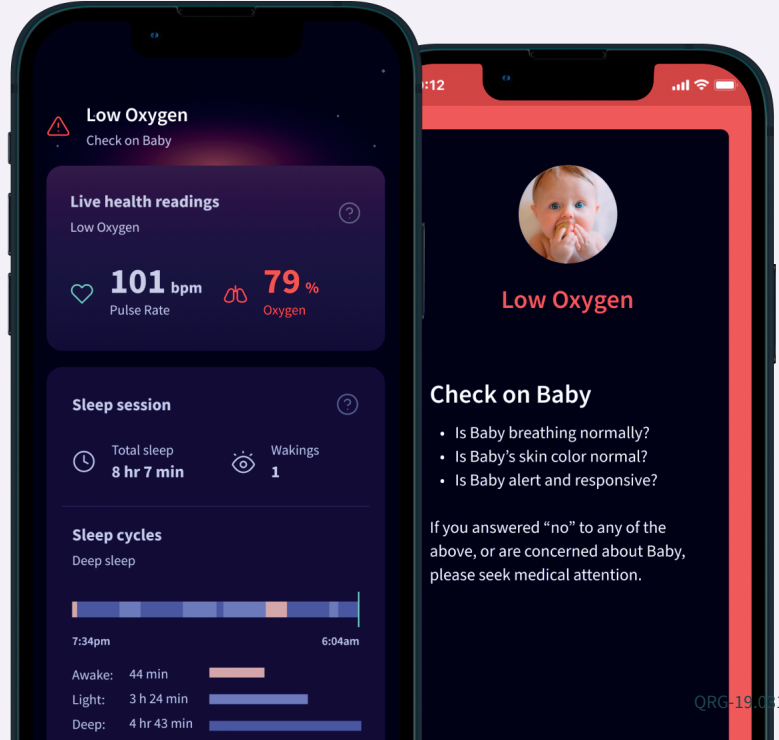



Sağlık Bildirimlerini etkinleştirme

Cihaz ayarlarından Sağlık Bildirimlerini etkinleştirin.

Sağlık Bildirimlerini Etkinleştirme

Sağlık Bildirimlerini etkinleştirmek için hesap sekmesinden Sock ayarlarına gidin.

Ardından Sağlık Bildirimlerini açık duruma getirin ve zorunlu eğitimi tamamlayın. Eğitimi tamamlamak için kırmızı bildirim sesini test etmeniz gerekecektir.

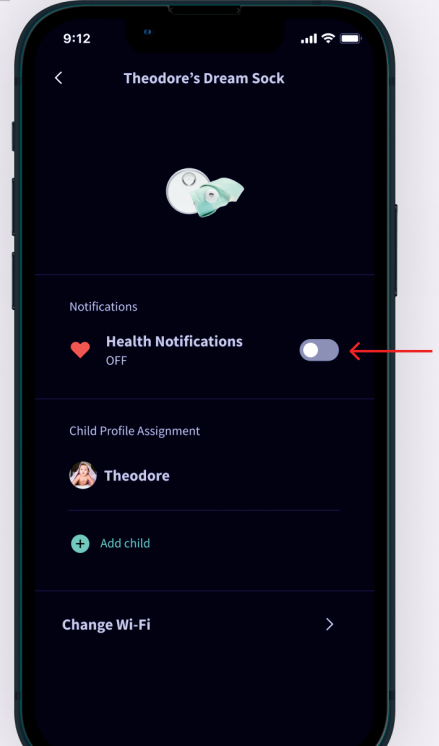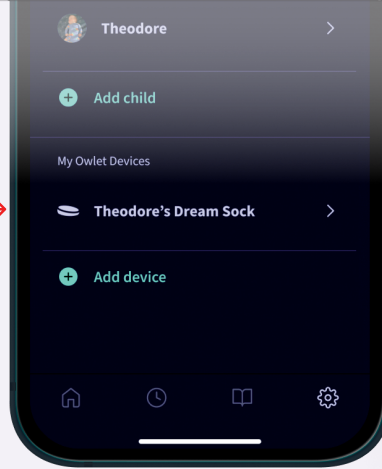

Canlı ölçümler için normal aralıklar

Kırmızı bildirim aldığınızda ilk olarak çocuğunuzun iyi olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Çocuğunuzun solunumu, cilt rengi (morarmış veya soluk mu), hareketliliği ve uyanıklığı kontrol edilmelidir. Çocuğunuzun durumu konusunda endişeleriniz varsa lütfen tıbbi yardım alın.

Normal sağlık ölçümleri hakkında daha fazla bilgi için Dream Sock Kullanma Kılavuzundaki Bölüm 7.2'ye bakın

Kalp Atış Hızı

Sağlık Bildirimleri etkinleştirildiğinde, uygulama çocuğunuzun Kalp Atış Hızı değerini canlı olarak görüntüler. Çocuğunuzun uyuduğu sıradaki Kalp Atış Hızının uyanık hâldekinden daha düşük olması normal bir durumdur. Çocuğunuzun uyanıp tekrar uykuya dalması, sağa sola dönmesi ve hatta ağlaması nedeniyle değerlerin oturum boyunca değişkenlik göstermesi de normaldir. Daha fazla bilgi için healthchildren.org adresini ziyaret edin veya endişeleriniz konusunda doktorunuza danışın.

Yaş	Uyku hâlinde normal Kalp Atış Hızı	Uyanık hâlde normal Kalp Atış Hızı
0-3 ay	90-160 BPM	100-205 BPM
4-12 ay	90-160 BPM	100-180 BPM
12-18 ay	80-120 BPM	98-140 BPM

Oksijen Doygunluğu

Uyku sırasında çocuğunuzun Oksijen Doygunluğu seviyesinin düşmesi ve hatta farklı pozisyonlarda ve uyku durumlarında bu seviyelerde dalgalanma olması normaldir. Normal Oksijen Doygunluğu seviyesi %90'ın üzerindedir. Ancak çocuğunuzun Oksijen Doygunluğu seviyesinin zaman zaman %90'ın altına düştüğü görülebilir. %90'ın altındaki seviyelerin uzun süreli olması veya sıkça görülmesi durumunda çocuğunuzu kontrol edin. Çocuğunuzun doktoruna başvurmanız gerekebilir.

Yaş	Normal Oksijen Doygunluğu
0-18 ay	%90-100

Sağlık Bildiriminin yanlışlıkla gönderildiğini düşünüyorsanız bu durum büyük ihtimalle aşağıdaki nedenlerden birinden kaynaklanmaktadır:

- Çorap Yerleşimi
- Hareket veya Ağlama
- Besleme/Gaz çıkarma
- Ayakların üşmesi

Sorun giderme kılavuzu

Kurulum, bağlantı ve işletimle ilgili sorunları çözmek için aşağıdaki sorun giderme kılavuzunu kullanın. Teknik bildirimler dâhil olmak üzere, sorun giderme bildirimleriyle ilgili bilgi için bir önceki sayfaya bakın.

Sorun	Olası Nedenler	İşlemler
Kurulum sırasında Owlet Wi-Fi ağı görülmüyor	Baz İstasyonu açık değildir	Baz İstasyonunu prize takın
	Wi-Fi ağına zaten bağlanılmıştır	Baz İstasyonunun altındaki yeşil Wi-Fi ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Yanıyorsa bu adımı atlayabilir ve uygulamada hesabınızı oluşturmaya devam edebilirsiniz.
Owlet Uygulamasında evinizin Wi-Fi ağı görülmüyor	Ev yönlendiriciniz 5,0 GHz'dir (Owlet yalnızca 2,4 GHz'i destekler)	Mobil cihazınızın 2,4 GHz ağına bağlı olduğundan emin olun (çoğu 5,0 GHz yönlendirici 2,4 GHz'i de destekler)
Baz İstasyonu Wi-Fi ağına bağlanmıyor	Parola yanlışdır	Wi-Fi ağına parolasını bir kez daha kontrol edin
	Baz İstasyonu Wi-Fi yönlendiricinizin kapsama alanı dışındadır	Kurulum için Baz İstasyonunu Wi-Fi yönlendiricinize yaklaştırın
	Wi-Fi ağı çalışmıyor	Mobil cihazınızı yeniden başlatmayı ve Wi-Fi ağına yeniden bağlanmayı deneyin veya Wi-Fi yönlendiricinizi sıfırlayın.
	Wi-Fi ağına tarayıcı üzerinden kimlik doğrulaması gerekiyordu veya güvenlik duvarı kısıtlamaları vardır.	Farklı bir ağına bağlanmayı deneyin.
	Ev yönlendiriciniz 5,0 GHz'dir (Owlet yalnızca 2,4 GHz'i destekler)	Mobil cihazınızın 2,4 GHz ağına bağlı olduğundan emin olun (çoğu 5,0 GHz yönlendirici 2,4 GHz'i de destekler)
Uygulamaya giriş yapılamıyor	Parolayı unutmuş olabilirsiniz	Parolanızı sıfırlayın. Kullanım Talimatlarındaki Bölüm 10.2'ye bakın.
Sensör Baz İstasyonuna bağlanmıyor	Sensör, Baz İstasyonunun kapsama alanı dışındadır	Baz İstasyonunu farklı bir yere taşıyın.
	Diğer cihazlar Sensörde parazite neden oluyordu.	Sensör veya Baz İstasyonunun yakınındaki diğer elektronik cihazların yerini değiştirin ya da Baz İstasyonunu farklı bir yere taşıyın.
Baz İstasyonu Owlet iOS uygulaması hesabınıza kaydedilemiyor	Baz İstasyonu ve mobil cihazınız aynı Wi-Fi ağına bağlı değildir	Mobil cihazınızın Baz İstasyonu ile aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğunu doğrulayın
	Baz İstasyonunun Wi-Fi bağlantısı kesilmiştir	Baz İstasyonunun alt kısmındaki yeşil Wi-Fi ışığını kontrol edin. Bu ışık yanıyor olmalıdır. Yanmıyorsa Baz İstasyonunu Wi-Fi ağına yeniden bağlamayı deneyin.

Sorun	Olası Nedenler	İşlemler
Baz İstasyonunun internet bağlantısı kesildi.	Baz İstasyonu Wi-Fi yönlendiricinizin kapsama alanı dışındadır.	Baz İstasyonunu ve Wi-Fi yönlendiricisini birbirine yaklaştırın. (NOT: Wi-Fi kapsama alanı genişletici veya ikinci bir yönlendirici kullanmak işe yaramaz.)
	Evinizin Wi-Fi ağı çalışmıyordur.	Wi-Fi yönlendiricinizi sıfırlayın
Uygulama sıfırlandı ve sistemin tekrar kurulması isteniyor	Baz İstasyonu farklı bir kullanıcı hesabına kaydedilmiştir.	Baz İstasyonu aynı anda yalnızca bir hesaba kaydedilebilir. Tüm Bakım Verenler için tek bir hesap kullanın.
	Giriş sırasında farklı bir hesap kullanılmıştır.	Uygulamadan çıkış yapın ve doğru hesapla giriş yapın.
Uygulamadan çıkış yapılamıyor	Kurulum tamamlanmamıştır	Kurulumu tamamlayın veya uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyin.

Ek bilgi için Kullanım Kılavuzunun aşağıdaki bölümlerine bakın:

BÖLÜM	BÖLÜM BAŞLIĞI	BÖLÜM	BÖLÜM BAŞLIĞI
1	Genel Bilgiler	5	Kurulum
1.1	Ekonomik Çalışma	7	Owlet Dream App'i Kullanma
2	Güvenlik Bilgileri	6.3	Bildirimler ve Göstergeler
4.3	Baz İstasyonu	8	Sock'ın ve Sensörün Temizlenmesi
4.4	Sensör	11	Sorun Giderme
4.5	Sock	12	Teknik Bilgiler

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Owlet Baby Care Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin
Owlet Baby Care, Inc.
3300 N Ashton Blvd., Suite 300
Lehi, UT 84043 ABD
www.owletcare.com

Owlet Türkiye: Küçükbakkalköy mah.
Brandium Rez. R2/177 Ataşehir/
İstanbul
Tel: 0216 504 15 44
www.owletcare.com.tr

Ηızlı Başvuru Kılavuzunun diğır çevirilerine ulaşın



<https://support.owletcare.com/hc/en-us/articles/26037400413325>

Für eine übersetzte Version dieses Dokuments verwenden Sie bitte die oben angegebene URL.

Bruk URL-adressen ovenfor for å finne en oversatt versjon av dette dokumentet.

Per una versione tradotta del presente documento usare l'URL di cui sopra.

Pour une version traduite de ce document, utilisez l'adresse URL ci-dessus.

Brug webadressen ovenfor for at få vist en oversat version af dette dokument.

Si desea consultar una versión traducida de este documento, use la url anteriormente indicada.

Använd ovanstående url för att få en översatt version av detta dokument.

Zie bovenstaande URL voor een vertaalde versie van dit document.

Para consultar a versão traduzida deste documento, utilize o URL acima.

Aby uzyskać przetłumaczoną wersję tego dokumentu, użyj powyższego adresu URL.

Pro přeloženou verzi tohoto dokumentu použijte výše uvedenou adresu URL.

Přeloženú verziu tohto dokumentu nájdete na vyššie uvedenej adrese URL.

A dokumentum lefordított változatához használja a fenti URL-címet.

Pentru o versiune tradusă a acestui document, vă rugăm să utilizați adresa URL de mai sus.

За преведена версия на този документ, моля, използвайте URL адреса по-горе.

Για μια μεταφρασμένη έκδοση αυτού του εγγράφου, χρησιμοποιήστε την παραπάνω διεύθυνση.

Fyrir íslenska þýðingu af þessu QRG skannið hér

Türkiye Yetkili Distribütörü

Certus Mercatus Dış Ticaret A.Ş

info@certus-mercatus.com

owletcare.tr@certus-mercatus.com

0216 504 15 44

Güvenlik:

Sizin güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği bizim için çok önemlidir.

Bu kılavuzda ve Owlet Baby Care uygulamasında birçok önemli güvenlik talimatı bulacaksınız.

Her zaman ve mutlaka tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.

SİZİN VE ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİ İÇİN:

HERHANGİ BİR BİLDİRİM SESİNDE HEMEN YANIT VERİN.

BAZ İSTASYONUNU DAİMA YATAKTAN EN AZ 1 METRE UZAK TUTUN.

OWLET DREAM SOCK Bir Yardımcıdır. Yetişkin Gözetimi Yerine Geçmez.